



TENSIÓMETRO DIGITAL

DE BRAZO

Este dispositivo adopta la tecnología oscilométrica con algoritmos de Fuzzy, medición de la presión arterial y pulso. El puño está alrededor del brazo y automáticamente es inflado por la bomba de aire. El sensor del dispositivo atrapa débil fluctuación de la presión en el puño fabricado por extensión y contracción de la arteria del brazo en respuesta a cada latido.

La amplitud de las ondas de la presión se mide, convertidos en milímetros de mercurio y se muestra por valor digital.

ESPECIFICACIONES


Marca: Medimax®
 Adaptador: 6V, 600 mA (No incluido)
 Batería: 4 x AAA (1.5V)
 Presión extrema: 300 mmHg
 Brazaletes: 22 - 32 cm
 Memoria: 90 mediciones.

CARACTERÍSTICAS

Almacena 90 lecturas.
 Promedio de las últimas 3 lecturas
 Hora y fecha
 Rango de brazaletes: 22-32 cm.
 Apagado automático
 Indicador de clasificación de la presión arterial de la OMS.
 Pantalla LCD grande.



Indicador OMS

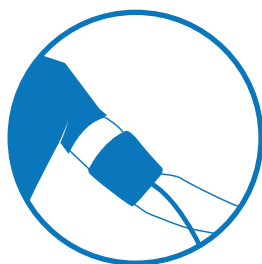

Inflación automática

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582